

Période de traitement	Réveillé/Endormi	Fréquence / Durée	Inspecter la peau chaque :
Jour :	Réveillé		
jusqu'au			
Jour :	Endormi		
Jour :	Réveillé		
jusqu'au			
Jour :	Endormi		
Jour :	Réveillé		
jusqu'au			
Jour :	Endormi		



AW-1.90069 REV A

NOTICE DE PRODUIT

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS ET AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

CONSEILS D'USAGE

- Utilisez des cubes ou des morceaux de glace pour obtenir une performance optimale.
- Pour vider le coussinet entre utilisations, tenez-le à la verticale, le tuyau pointé vers le sol. Appuyez sur le plongeur noir et laissez l'eau s'écouler du coussinet.
- Vous pouvez déconnecter l'Intelli-Flo Pad de l'élément sans retirer le coussinet de la zone affectée en enfonçant les languettes du raccord de tuyau et en séparant délicatement les tuyaux. L'Intelli-Flo Pad et l'élément se scelleront et ne fuiront pas. Remarque : un certain écoulement est normal pendant le dégagement.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER LA POMPE SANS EAU! La pompe de cette unité est destinée à fonctionner avec de l'eau. Si l'élément fonctionne sans eau, des dommages permanents seront causés à la pompe. Débranchez l'élément avant de retirer le couvercle de l'eau.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Après usage, videz et essuyez la pompe avec un chiffon doux. De temps à autre, on peut utiliser de l'eau tiède et un détergent doux pour nettoyer la pompe et les tubes. Aucune pièce n'est réparable. Contactez les Relations client de BREG si vous avez besoin de pièces de rechange.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Comme pour tous les produits électriques, vous devez observer des précautions pour éviter l'électrocution, un incendie, des brûlures ou autres blessures. Surveillez les enfants et les personnes invalides à proximité de ce produit pour assurer que ces précautions sont observées.

Les connexions électriques doivent rester sèches

Même si l'élément Polar Care est destiné à contenir et à pomper de l'eau, les connexions électriques à la prise de courant et du cordon d'alimentation à l'élément Polar Care ne sont pas étanches et doivent rester sèches.

- Ne manipulez pas le transformateur ou le cordon électrique avec des mains mouillées.
- Gardez toujours l'élément dans un lieu où les connexions ne tomberont pas dans l'eau (c'est-à-dire une baignoire, un évier, etc.).
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.


Si les connexions électriques tombent dans l'eau, ne touchez aucune pièce mouillée du produit. Débranchez-le uniquement aux connexions électriques sèches.

Évitez les produits inflammables et les oxydants

Ne l'utilisez pas dans des lieux avec des vapeurs ou gaz inflammables (par exemple des anesthésiques inflammables), des concentrations élevées d'oxygène ou d'autres oxydants (par exemple de l'oxyde nitreux).

Utilisez une prise mise à la terre

Connectez ce produit uniquement à une prise correctement mise à la terre.

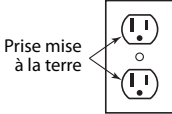

Protégez le cordon d'alimentation et le transformateur

- Tenez le cordon d'alimentation et le transformateur à distance des surfaces chaudes.
- Installez et utilisez cet équipement dans un lieu à faible passage, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

Ne faites jamais fonctionner ce produit si son cordon d'alimentation, son transformateur ou sa fiche sont endommagés. Si le cordon d'alimentation, le transformateur ou la fiche sont endommagés, débranchez-les et contactez le Service client de BREG.

Démarrez le produit

Utilisez uniquement le transformateur fourni avec le Polar Care KODIAK, Réf. BREG 6.00136, pour répondre aux normes UL 60601-1. Connectez avec des mains sèches le transformateur à la connexion électrique située en haut du refroidisseur. Puis branchez le transformateur à une prise électrique appropriée. L'élément commencera automatiquement à fonctionner à ce stade.

Débranchez le produit pour l'arrêter quand vous ne l'utilisez pas

Lorsque vous débranchez l'élément Polar Care, vous l'éteignez. Débranchez-le toujours immédiatement après utilisation. Ne le laissez jamais branché sans surveillance.

Interférence électromagnétique

Cet élément Polar Care peut provoquer des interférences électromagnétiques ou autres avec d'autres appareils électriques. Pour vérifier si l'élément Polar Care provoque des interférences avec un autre appareil, débranchez-le. Si le problème est corrigé, déplacez l'élément Polar Care ou l'autre appareil ou utilisez une prise sur un autre circuit.

GUIDE DE DÉPANNAGE

La pompe ne fonctionne pas

L'eau ne s'écoule pas vers le coussinet

Le coussinet ne refroidit pas

- Assurez-vous que le transformateur est enfiché correctement dans l'élément et dans la prise murale.
- Assurez-vous que la glace et l'eau atteignent les niveaux indiqués.
- Assurez-vous que le coussinet n'est pas tordu.
- Tirez doucement sur le tube bleu pour vous assurer que la jonction tube/coussinet est droite.
- Retirez le coussinet et remplissez-le quand il est à plat; puis réappliquez-le sur le patient.
- Assurez-vous que les manchons de raccordement du coussinet sont bien fixés à l'élément.
- Réduisez la quantité de glace et augmentez la quantité d'eau.
- Tournez le mélange eau et glace dans le refroidisseur. Vous éliminerez les poches d'eau chaude.

Fuites

Remarque : une certaine condensation sur les tuyaux, le contrôleur et le coussinet est inévitable, particulièrement dans les climats plus chauds.

- En cas de fuite (et non de condensation sur les tuyaux), débranchez les manchons de raccordement du coussinet. Assurez-vous que les pinces de dégagement des manchons sont enfoncées avant de reconnecter le coussinet au tuyau de la pompe; assurez-vous ensuite que les deux côtés du manchon sont bien encliquetés.
- Si une fuite est détectée dans le coussinet, cessez de l'utiliser et appelez les Relations client de BREG au 1-800-321-0607.

MISE AU REBUT



Mettez le produit au rebut conformément aux réglementations locales.

GARANTIE

BREG, Inc. garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux et est apte à l'emploi pendant 180 jours à partir de son achat initial sous les conditions d'utilisation normales pour lesquelles il a été prévu pour autant que, et uniquement sous cette condition, il ait été correctement utilisé sous la surveillance directe d'un praticien habilité. La seule obligation de BREG, Inc. aux termes de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation d'une ou de plusieurs pièces défectives de ce produit. Toutes garanties expresses ou implicites, dont les garanties de qualité commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière, sont limitées à la durée de garantie susmentionnée. Il n'existe aucune autre garantie expresse ou implicite, et aucune affirmation de la part du revendeur, orale ou autre, ne constitue une garantie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Symboles utilisés sur le Polar Care Kodiak

Symbole	Description
	Symbole d'alerte de sécurité. Il vous alerte sur les risques potentiels de blessures physiques. Obéissez à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter le risque de blessures ou la mort.
	Type B, pièce appliquée.

Caractéristiques physiques et électriques

Caractéristiques électriques : Entrada		120 V ca 60 HZ 125 mA max.
Exigences environnementales : Température : Fonctionnement Transport et conservation Humidité : Fonctionnement Transport et conservation Pression atmosphérique :		
Conformité aux normes :		Conçu pour être conforme aux normes applicables de : UL 60601-1, CSA C22.2/No. 601.1
Classifications électriques :		Classe II, fonctionnement continu. Ne pas utiliser en présence d'anesthésiques inflammables.

Produit no :	10601
Poids :	1,4 kg (3 lb) vide, 5 kg (11 lb) rempli
Plage de fonctionnement moyenne :	≥ 7,2 °C (≥ 45 °F)
Fiche :	1,3 mm x 3,5 mm x 9,5 mm Broche CTR positive
Alimentation :	6 V cc 600-1000 mA



BREG Inc.
Vista, CA 92081 U.S.A.
WWW.BREG.COM
Telephone (800) 321-0607
(760) 599-3000
Telefax (760) 598-6193

